



# Precellys® Evolution



## Super Broyeur

Precellys® Evolution,  
l'homogénéiseur d'échantillons  
le plus efficace et le plus flexible.

- **Super rapide** : jusqu'à 10 000 rpm pour les échantillons difficiles
- **Super robuste** : fabrication française de haute qualité
- **Super flexible** : 4 volumes de tubes de 0.5 à 15ml
- **Super efficace** : agitation 3D puissante
- **Super facile** : système de blocage automatique des tubes



**Super protecteur** : compatible avec la seule unité de refroidissement brevetée pour les molécules thermo-sensibles



24x2ml  
12x7ml  
6x15ml

[www.precellys.com](http://www.precellys.com)

# PRECELLYS® EVOLUTION


## Le broyeur d'échantillons le plus efficace et le plus flexible

### Precellys® Evolution


Le Precellys® Evolution est le seul broyeur-homogénéiseur combinant **robustesse, sécurité, efficacité et flexibilité** de façon optimale.

Spécialement conçu pour des **laboratoires de confinement L3**, le Precellys® Evolution est le **résultat de 10 ans d'expertise** dans le domaine de la préparation des échantillons biologiques. Son mouvement multidirectionnel puissant offre une efficacité de broyage optimale et similaire pour chacun des échantillons.


Le Precellys® Evolution peut être utilisé avec **4 volumes de tubes différents** et traite **jusqu'à 24 tubes simultanément**. Sa flexibilité et son efficacité permettent de **broyer, d'homogénéiser ou de lyser** tout type d'échantillon (animal, humain, végétal ou micro-organisme) en 30 secondes. Precellys® Evolution est la solution idéale pour des applications de routine ou des projets de R & D.

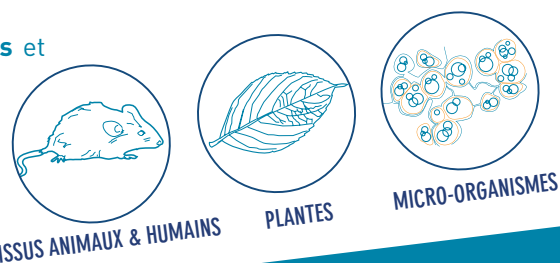


### Precellys® Evolution - Mode d'emploi

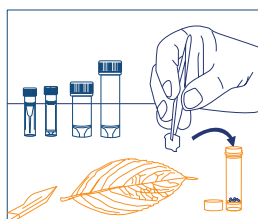

1. Choisissez le kit Precellys® adapté à votre type d'échantillon (tubes pré-remplis de billes, disponibles en 0,5, 2, 7 ou 15 ml).

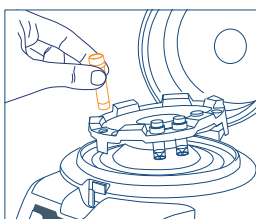


2. Choisissez le porte-tube approprié et chargez de 1 à 24 échantillons dans le Precellys® Evolution.

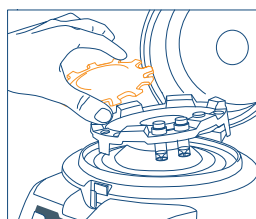


3. Positionnez le « peigne » (système de blocage des tubes breveté) pour maintenir les échantillons durant le broyage. Fermez le couvercle.



4. Sélectionnez « Démarrage » dans le menu et réglez les paramètres avec les boutons haut / bas.

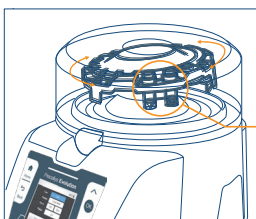

5. Appuyez sur « Start ». Le mouvement 3D fournit la même efficacité d'homogénéisation pour chaque tube.

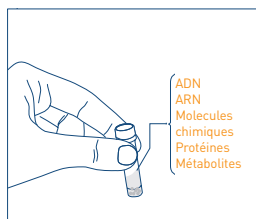

6. ~ 30 secondes plus tard, vos échantillons sont prêts pour analyse !

**Préservez vos molécules thermo-sensibles : améliorez le rendement et la stabilité des molécules thermo-sensibles en utilisant l'unité de refroidissement Cryolys !**

### Gamme Precellys®

► Découvrez les autres produits de la gamme Precellys®



Precellys® 24 pour une cadence élevée



Minilys® pour un usage personnel



Cryolys® pour les molécules thermo-sensibles



Kits de broyage



### Caractéristiques techniques

**CAPACITÉ**  
de 1 à 24 tubes de 2 ml ou 0,5 ml  
de 1 à 12 tubes de 7 ml  
de 1 à 6 tubes de 15 ml

**VITESSE**  
De 4 500 à 10 000 rpm  
(rotation par minute)  
par incrément de 100 rpm

**PROGRAMMES**  
Nombre illimité

**NOMBRE DE CYCLES**  
10 maximum

**TEMPS**  
Durée d'un cycle : de 5 à 90s  
Pause entre les cycles : max 120s

**TAILLE**  
L : 378mm, P : 515mm, H : 400mm  
(632mm couvercle ouvert)

**POIDS**  
27,2 kg

**NORMES**  
CE, FCC part 15 & 18

**ÉLECTRICITÉ**  
90 - 250VAC / 50-60 Hz  
Puissance : 1 kVA

**BRUIT** < 70dB

**RÉFÉRENCE CATALOGUE**  
EQ02520-300-RD000.0



Contactez nos spécialistes d'applications

Pour recevoir un descriptif technique complet ou avoir une présentation  
01 30 85 92 89 ou [equipement@ozyne.fr](mailto:equipement@ozyne.fr)